


This document hosted by  
**OldWillKnottScales**  
CLICK HERE  
to visit us the next  
time ya' need a scale!

# seca

## seca 804

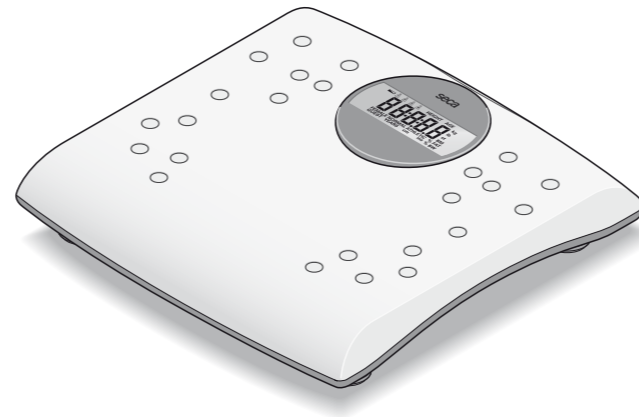

<b>D</b>	<i>Bedienungsanleitung und Garantieerklärung</i>	<b>1</b>
<b>GB</b>	<i>Instruction manual and guarantee</i>	<b>10</b>
<b>F</b>	<i>Mode d'emploi et garantie</i>	<b>20</b>
<b>I</b>	<i>Manuale di istruzioni e garanzia</i>	<b>30</b>
<b>E</b>	<i>Manual de instrucciones y garantía</i>	<b>40</b>
<b>DK</b>	<i>Bedjeningsvejledning og garantibevis</i>	<b>50</b>
<b>S</b>	<i>Bruksanvisning och garanti</i>	<b>60</b>
<b>N</b>	<i>Bruksanvisning og garantierklæring</i>	<b>70</b>
<b>FIN</b>	<i>Käyttöohje ja takuu</i>	<b>80</b>
<b>NL</b>	<i>Bedieningshandleiding en garantieverklaring</i>	<b>90</b>
<b>P</b>	<i>Instruções de utilização e declaração de garantia</i>	<b>100</b>
<b>GR</b>	<i>Οδηγίες χειρισμού και εγγύηση</i>	<b>110</b>
<b>PL</b>	<i>Instrukcja obsługi i deklaracja gwarancji</i>	<b>120</b>
<b>RUS</b>	<i>Инструкция по эксплуатации и гарантийное свидетельство</i>	<b>130</b>
<b>TR</b>	<i>Kullanım kılavuzu ve garanti beyanı</i>	<b>140</b>
<b>J</b>	<i>使用説明書および保証について</i>	<b>150</b>






seca gmbh & co. kg.  
Medizinische Waagen und Messsysteme  
Hammer Steindamm 9-25  
22089 Hamburg  
Germany  
Telephone +49 40 20 00 00 0  
Telefax +49 40 20 00 00 50  
E-Mail info@seca.com

#### seca branches around the world:

seca austria  
seca france  
seca mexico  
seca nihon  
seca north america east  
seca north america west  
seca schweiz  
seca united kingdom  
seca zhong guo

All contact data under [www.seca.com](http://www.seca.com)

**seca**  
Precision for health

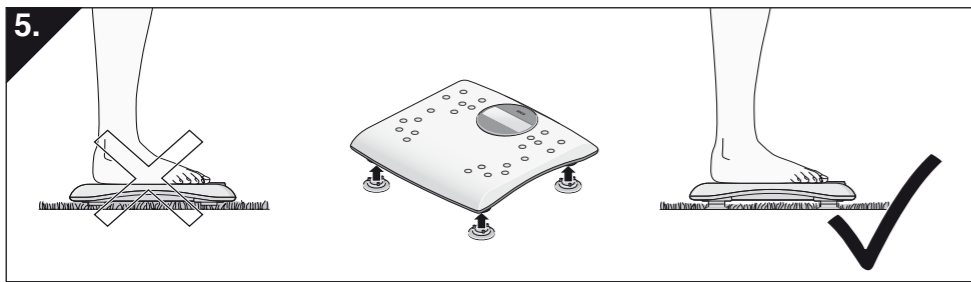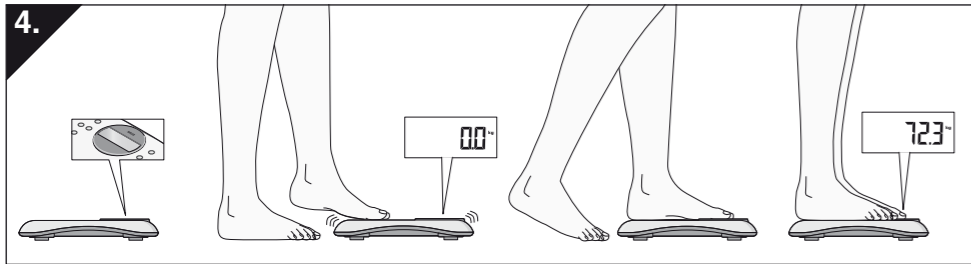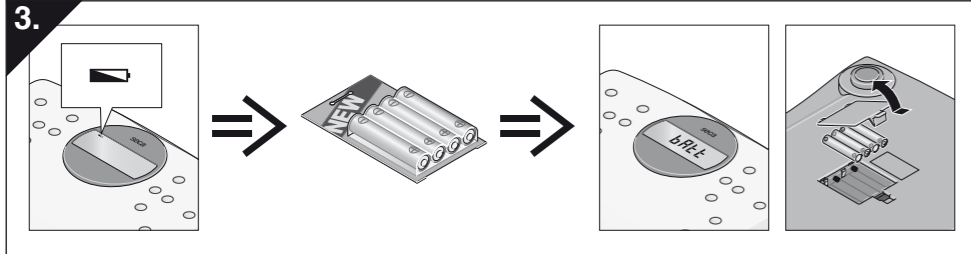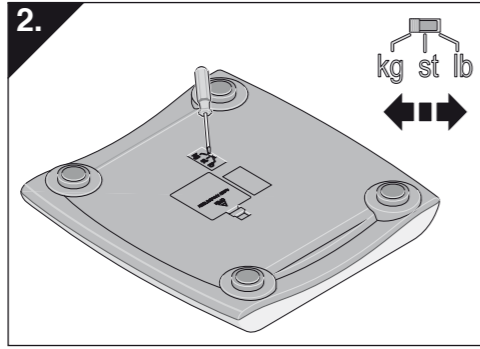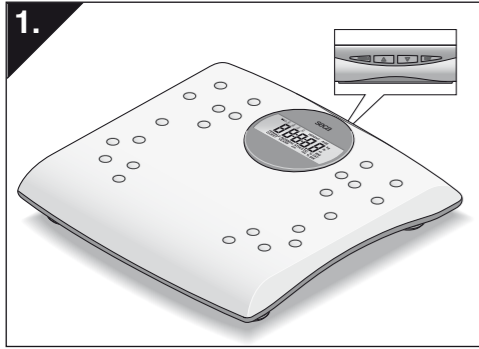

# 1. Herzlichen Glückwunsch!

---

Mit der elektronischen Personenwaage **seca 804** haben Sie ein hochpräzises und gleichzeitig robustes Gerät erworben.

Seit über 150 Jahren stellt seca seine Erfahrung in den Dienst der Gesundheit und setzt als Marktführer in vielen Ländern der Welt mit innovativen Entwicklungen für das Wiegen und Messen immer neue Maßstäbe.

Neben der konventionellen Bestimmung des Gewichtes kann die **seca 804** auch den Body-Mass-Index und die Körperzusammensetzung (Anteil des Körpergewe-

bes an Fett und Wasser) ermitteln. Hierzu wird ein nicht spürbarer harmloser Wechselstrom durch den Körper geleitet.

Die Gewichtsanzeige kann zwischen Kilogramm (kg), Pounds (lb) und Stones (st) umgeschaltet werden. Das Gewicht wird innerhalb weniger Sekunden ermittelt.

Die Waage ist sehr stabil gebaut und wird Ihnen lange treue Dienste leisten. Sie ist einfach zu bedienen und die große Anzeige ist leicht lesbar.

## 2. Sicherheit

---

Bevor Sie die neue Waage benutzen, nehmen Sie sich bitte ein wenig Zeit, um die folgenden Sicherheitshinweise zu lesen.

- Beachten Sie die Hinweise in der Bedienungsanleitung.
- Bewahren Sie die Bedienungsanleitung und die darin enthaltene Konformitätserklärung sorgfältig auf.
- Sie dürfen diese Waage nicht verwenden, wenn Sie Träger eines Herzschrittmachers, einer Insulinpumpe oder anderer, elektronisch geregelter Medizinprodukte sind. Es könnte zu Funktionsbeeinträchtigungen kommen.
- Setzen Sie die Waage keiner übermäßigen Feuchtigkeit aus.
- Sie dürfen die Waage nicht fallen lassen oder heftigen Stößen aussetzen.
- Lassen Sie Reparaturen ausschließlich von autorisierten Personen durchführen.
- Verwenden Sie ausschließlich den angegebenen Batterietyp (siehe „Batteriewechsel“ auf Seite 8).

## 3. Bevor es richtig losgeht...

---

### Auspacken

Entfernen Sie die Verpackung und stellen Sie die Waage auf einen festen, ebenen Untergrund.

## Stromversorgung

Die Stromversorgung der Waage erfolgt ausschließlich über Batterien.

Die LC-Anzeige hat einen geringen Stromverbrauch – mit einem Satz Batterien sind 8.000 Wägungen möglich. Wenn die Anzeige  oder **bAEE** im Display erscheint, sollten Sie die Batterien wechseln. Sie benötigen 4 Micro-Batterien, Typ AAA, 1,5 Volt.

Alle Abbildungen finden Sie vorne auf der Ausklappseite.

- Drehen Sie die Waage vorsichtig um, so dass der Boden der Waage zugänglich ist (siehe Abb. **3**).
- Drücken Sie den Verschluss des Batteriefachs in Richtung des Aufdrucks „Battery“ und klappen Sie den Deckel auf.
- Legen Sie die neuen Batterien in das Batteriefach ein.

### Achten Sie auf die richtige Polung.

- Verschließen Sie den Deckel.
- Drehen Sie anschließend die Waage wieder um.

## Umschaltung der Gewichtsanzeige

Die Gewichtsanzeige kann zwischen Kilogramm (kg) und Pounds (lb) bzw. Kilogramm (kg) und Stones (st) umgeschaltet werden (siehe Abb. **2**). Nach dem erneuten Anschalten wird die Messung in der geänderten Gewichtseinheit vorgenommen.

## 4. Waage aufstellen

---

- Stellen Sie die Waage auf einen festen Untergrund.
- Achten Sie darauf, dass die Waage nur mit den Füßen Bodenkontakt hat. Die Waage darf nirgends aufliegen.
- Sollten Bodenunebenheiten den Waagenboden berühren (z.B. hoher Teppichflor), stecken Sie die mitgelieferten Teppichfüße auf (siehe Abb. **5**).

## 5. Bedienung


---

### Einfaches Wiegen

- Treten Sie leicht auf die Waage (siehe Abb. **4**). Der Erschütterungsschalter startet die Waage.

In der Anzeige erscheinen nacheinander **SECA**, **88888** und **0.0**. Danach ist die Waage automatisch auf Null gesetzt und betriebsbereit.

- Schalten Sie gegebenenfalls die Gewichtsanzeige um (siehe „Umschaltung der Gewichtsanzeige“ auf Seite 2).
- Betreten Sie die Waage und bleiben Sie ruhig stehen.

Nach der Gewichtsermittlung versucht die Waage auch die Messung der Körperzusammensetzung durchzuführen, erkennbar am durch das Display wandernden Symbol . Sie können nun einfach die Waage verlassen (die Waage zeigt kurz eine Fehlermeldung an).

- Lesen Sie das Wiegeergebnis an der digitalen Anzeige ab.
- Bei Belastung der Waage über 150 kg bzw. über 330.6 lb erscheint in der Anzeige **SEOP**.